

ACTI-SENS Bewegungssensor (Serie E)

Alarmiert mittels drahtlosruf Empfänger SET über bestehende verkabelte Bewohner- Patientenrufanlage

Mob. Drahtlos- Rufempfänger SET's für Bewohner- Patientenzimmer!
Rufübertragung über die best. Verkabelte Bewohner- Patientenrufanlage



 ACTICOM

ACTI-SENS ist ein kabelloser unaufälliger intelligenter Bewegungssensor für die Aktivitätsüberwachung von beeinträchtigten Bewohnern- Patienten!

Der ACTI- SENS Bewegungssensor ist ein Wärme- unempfindlicher Bewegungs- Sensor für den Innenbereich!

Gespiesen mittels Standard Batterie 3V CR/2032!

Eingebaut in einem transparenten kleinen Hart- Kunststoffgehäuse weiss!
Inkl. Magnethalterungen zum einfachen Anbringen an Bett- Unterseite
Türrahmen- Spiegelschränke etc.


Dimension Gehäuse: L=75mm B=55mm T=35mm

Erfassungsbereich des Sensors: 180 Grad, Reichweite Radius ca. 5-6 Meter
Der Bewegungssensor hat die Intelligenz, nach einer Rufauslösung eine Stillhalte- Wartzeit von 45 Sec. Abzulaufen! Ist dieser Timer abgelaufen, wird nach erneutem Erfassen Bewegung ein erneuter Aktivitäts- Ruf abgesetzt!


Einsatzgebiete des ACTI-SENS Sensors im Pflegealltag:

Anbringen an Türzarge bei Zimmereingang
Linse in die Richtung Zimmertür richten!
Sobald der Bewohner- Patient die Zimmertür öffnet, wird ein Aktivitäts- Ruf zum zuständigen Pflege- Betreuungspersonal übermittelt!

Überwachungsbereich Bewohner- Patientenbett!
Sobald der Bewohner- Patient beginnt das Bett zu verlassen, wird ein Aktivitäts- Ruf zum zuständigen Pflege- Betreuungspersonal übermittelt!

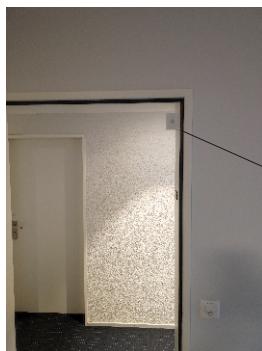

Überwachungsbereich Bewohner- Patientenzimmer WC!
Sobald der Bewohner- Patient das WC Betritt wird ein Aktivitäts- Ruf zum zuständigen Pflege- Betreuungspersonal übermittelt

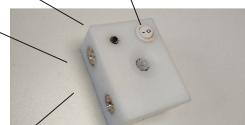


martin-gets
Medical Safety Systems


martin-gets
Kommunikationssysteme GmbH
Wiesentalstrasse 6, CH-9425 Thal
Tel. +41 71 886 48 27 Mobile +41 79 781 20 16
info@martin-gets.ch
www.martin-gets.ch

ACTI-SENS Bewegungssensor (Serie R Gets Wireless)


Alarmiert über Gets Wireless Drahtlosruf- Bewohner- Patientenrufanlage

Gets Wireless
OEM Modul R/5109.LOC



ACTI-SENS mit eingebautem Gets Wireless R/5109.LOC OEM
Drathlosrufauslöser!

Gets Wireless Rufauslöser mit und ohne zonenweise Rufstandort Erkennung
Gewohnte Parametrierung über Gets Wireless Web Tool (Secucare/ EasyCare)
Permanente Echtzeit LiveState Überwachung inkl. den Meldungen
Batterie Warnung bei 30%, und Batterie Dringend bei 15% über Gets Wireless

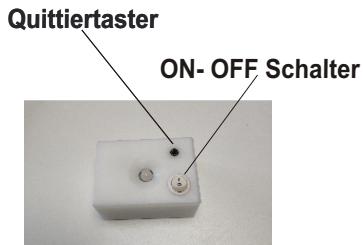

ACTI-SENS ist ein kabelloser unaufälliger intelligenter Bewegungssensor
für die Aktivitätsüberwachung von beeinträchtigten Bewohnern- Patienten!
Der ACTI- SENS Bewegungssensor ist ein Wärme- unempfindlicher
Bewegungs- Sensor für den Innenbereich!


Gespiesen mittels Standard Batterie 3V CR2032!
Eingebaut in einem transparenten kleinen Hart- Kunststoffgehäuse weiss!
Inkl. Magnethalterungen zum einfachen Anbringen an Bett- Unterseite
Türrahmen- Spiegelschränke etc.

Dimension Gehäuse: L=75mm B=55mm T=35mm
Erfassungsbereich des Sensors: 180 Grad, Reichweite Radius ca. 5-6 Meter
Der Bewegungssensor hat die Intelligenz, nach einer Rufauslösung eine
Stillhalte- Wartezeit von 45 Sec. abzulaufen! Ist dieser Timer abgelaufen, wird
nach erneutem Erfassen Bewegung ein erneuter Aktivitäts- Ruf abgesetzt!



Einsatzgebiete des ACTI-SENS Sensors im Pflegealltag:

Anbringen an Türzarge bei Zimmereingang
Linse in die Richtung Zimmertür richten!
Sobald der Bewohner- Patient die Zimmertür
öffnet, wird ein Aktivitäts- Ruf zum zuständigen
Pflege- Betreuungspersonal übermittelt!

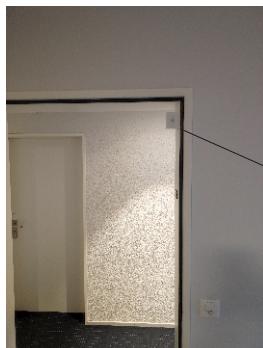

Überwachungsbereich Bewohner- Patientenbett!
Sobald der Bewohner- Patient beginnt das Bett zu verlassen, wird ein
Aktivitäts- Ruf zum zuständigen Pflege- Betreuungspersonal übermittelt!

Überwachungsbereich Bewohner- Patientenzimmer WC!
Sobald der Bewohner- Patient das WC Betritt wird ein Aktivitäts-
Ruf zum zuständigen Pflege- Betreuungspersonal übermittelt

